

Mepiform®

Dünnes und dezentes Narbenpflaster



Polyurethanfilm / Vliesstoff

- dünner, komfortabler Polyurethanfilm und Viskose-Vliesstoff
- wasserdampfdurchlässig / atmungsaktiv
- wasserabweisend




Mepiform® ist ein Narbenpflaster welches zur Behandlung von alten und frischen Narben sowie zur Narbenprävention verwendet werden kann.


Mepiform®


Mölnlycke®


Anwendungshinweise

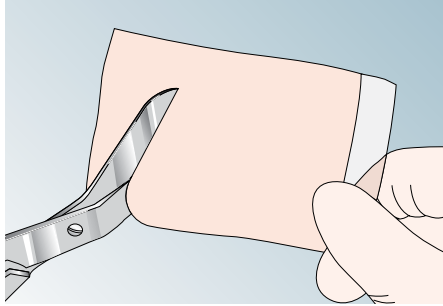

Entfernen Sie die Schutzfolie. Falls nötig, schneiden Sie den Verband auf die gewünschte Größe zu.

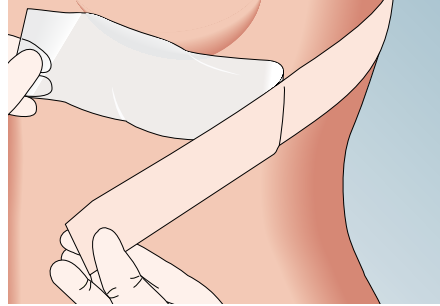

Applizieren Sie Mepiform® auf der Narbe. Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken und auch frei von Salben etc. ist.

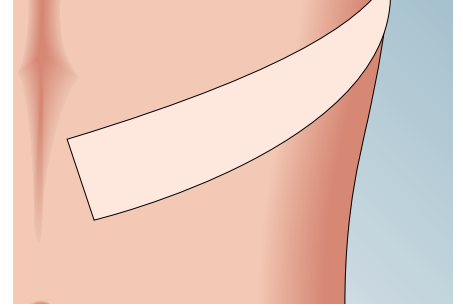

Verwenden Sie den Verband nach täglicher Reinigung der Narbe wieder.

So funktioniert Mepiform®

Es konnte empirisch nachgewiesen werden, dass Silikon einen positiven Einfluss auf hypertrophe Narben und Keloide hat.^{4,5} Je nach Alter und Zustand des Narbengewebes kann es 3 Monate bis ein Jahr oder länger dauern, bis die Konditionierung einer alten Narbe verbessert werden kann. Mepiform® sollte deshalb optimalerweise 24 Stunden am Tag getragen werden. Es wird empfohlen, die Narbe täglich zu inspizieren und zu waschen. Mepiform® kann hierzu zum Duschen oder Baden entfernt werden und derselbe Verband auf die trockene Narbe/Haut wieder appliziert werden. Bei prophylaktischer Behandlung sollte Mepiform®, je nach Zustand der Narbe, 2–6 Monate verwendet werden.

Vorteile von Mepiform®

- Mepiform® ist dünn, anpassungsfähig und dezent
- kann bei allen täglichen Aktivitäten getragen werden
- der Verband kann bis zu 7 Tage verwendet werden

Anwendungsempfehlungen

Mepiform® dient zur Behandlung von:

- alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden
- verhindert die Bildung von hypertrophen Narben und Keloiden bei verschlossenen Wunden



Beispiele von Wunden, bei denen Mepiform® verwendet werden kann:



Operativ geschlossene Wunden



Keloide



Hypertrophe Narben

Wichtige Hinweise!

Sollte es zur Mazeration oder zu Hautausschlägen kommen, stellen Sie die Behandlung ein, bis die Symptome verschwunden sind. Fahren Sie dann mit der Behandlung fort.

Mepiform® verfügt über einen ultravioletten Lichtschutzfaktor von 7.7.⁶

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung
29 36 00	4 x 30 cm	00 08 91 87	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	08 65 55 74	5
29 38 00	10 x 18 cm	08 65 55 97	5

einzel verpackt

Referenzen: 1. Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London. 2. Principles of best practice: Minimising pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007. 3. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Jo WC Vol10, No 2 (2001), p. 7-10. 4. Mustoe T A et al, International clinical recommendations on Scar Management. Plast. Reconstr. Surg, Vol 110, No 2 (2002), p. 560-571. 5. Maján J I et al. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic postoperative scars. Jo WC, Vol15, No 5 (2006), p.193-6. 6. Swedish Institute for Fibre and Polymer Research (1998).

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke®, das SafetaC® Logo und das Produkt Mepiform® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.


Mölnlycke®