

Guide trycksårsrelaterade skador av medicinsk utrustning – Mepilex® Lite


Mepilex® Lite skyddar huden, absorberar fukt och har visat sig skydda ömtålig hud från yttre krafter, till exempel friktion och tryck som orsakas av ofta användning av medicinsk utrustning^{1,2}.

Disclaimer: The prophylactic use of dressings in reducing the risk of medical device related pressure injuries is well reported, however their use under PPE in terms of maintenance of a seal and potential impact on viral transmission has not been tested by Mölnlycke or others to our knowledge.

- Mepilex Lite kan enkelt klippas till önskad form
- När du klipper i Mepilex Lite, ha kvar baksidesfilmen
- Mepilex Lite har en skonsam vidhäftning tack vare Safetac® teknologi³






Illustrationerna exemplifierar områden för skydd under medicinsk utrustning

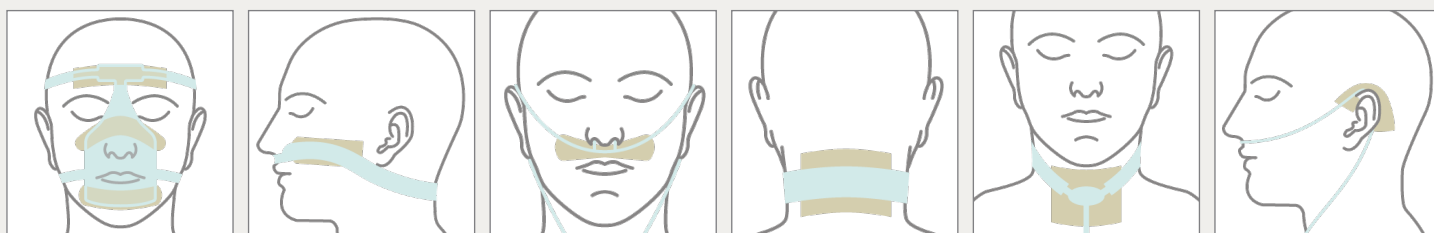

Klippguide

Välj en storlek på förbandet så att det drabbade området täcks och klipp ut för att anpassa patientens behov / kroppskonturer eller utrustning. Applicera med den vidhäftande sidan mot huden.

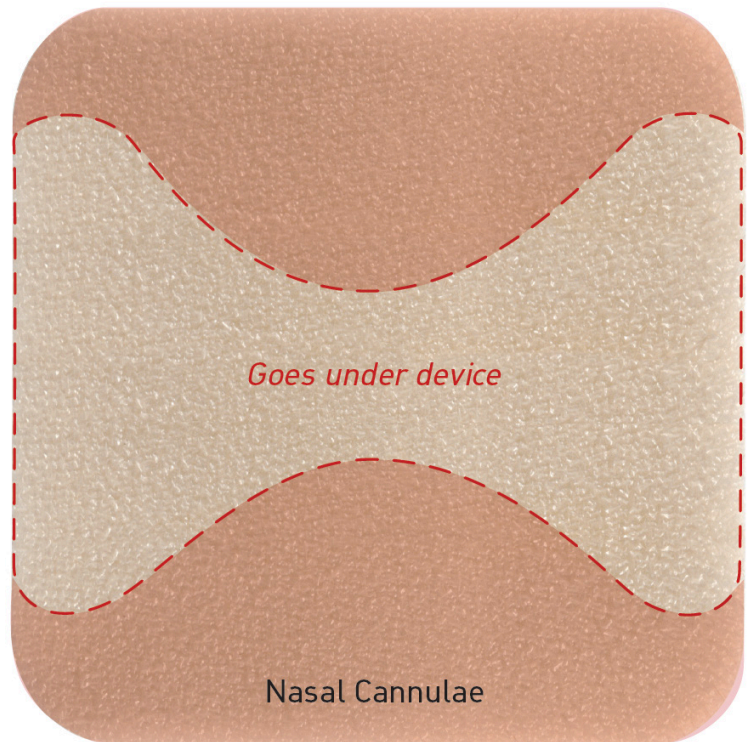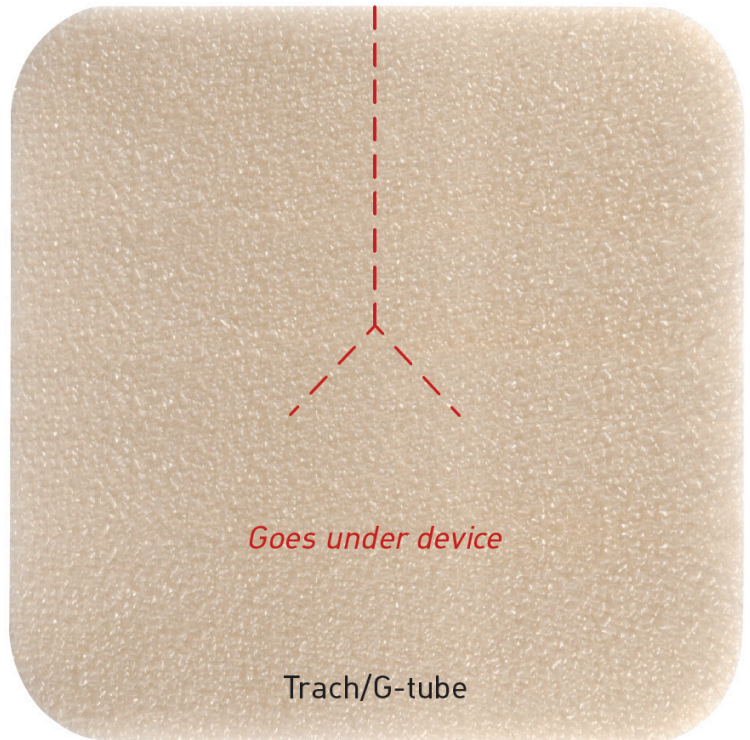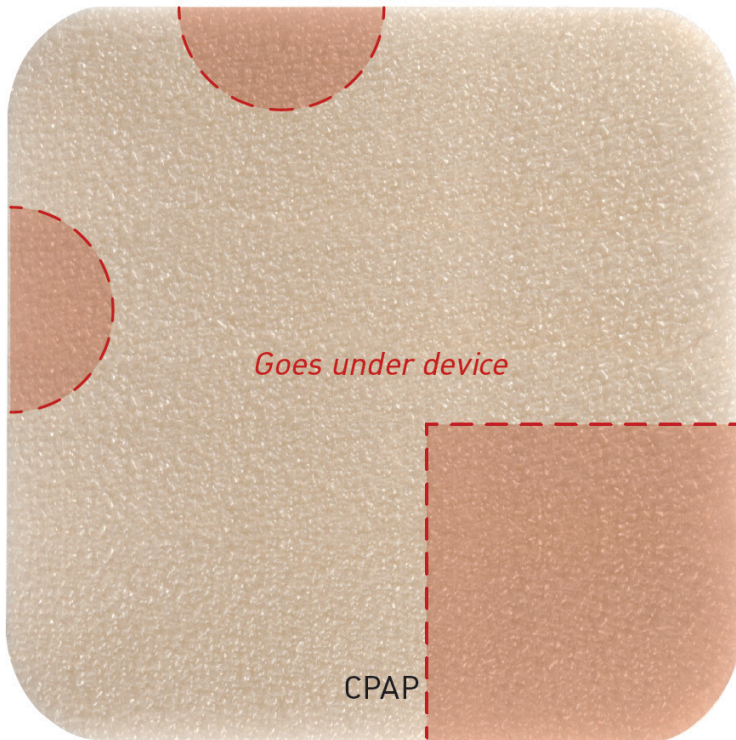

SafetaC
TECHNOLOGY

Friskrivningsklausul: Informationen som anges här ska inte tolkas som läkemedel eller ersätta en oberoende medicinsk bedömning av en patients kliniker. Denna information, inkluderar, men utan begränsning till förslag på produktens bärtid, produktval och föreslagen användning är baserad på generaliseringar och beaktar inte de unika egenskaperna hos en individs sår. Varje patients kliniker ska förbli ensam ansvarig för bedömning svårighetsgraden av patientens sår, bestämma lämplig behandling och sårbehandling.

Referenser: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Tel. 031 722 30 00.
The Mölnlycke, Mepilex and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. SEWC0012005


Mölnlycke[®]