

NYHET!

Mepilex[®] Border Heel Mepilex[®] Border Sacrum

Appliceringsguide



Mepilex[®] Border Heel
Mepilex[®] Border Sacrum


Mölnlycke[®]

Mepilex® Border Heel


Appliceringsguide

Obs:

Vid kliniska tecken på infektion kan Mepilex® Border Heel fortsätta användas om korrekt behandling av infektionen inleds. Använd inte förbandet på torr, intakt sårskorpa.

Före applicering:

Rengör intakt hud. Torka den omkringliggande huden noga. Se till att huden är fri från dimetikon (silikonolja), sprayplåster och mjukgörande krämer. Det behövs ingen hudbarriär under förbandet.

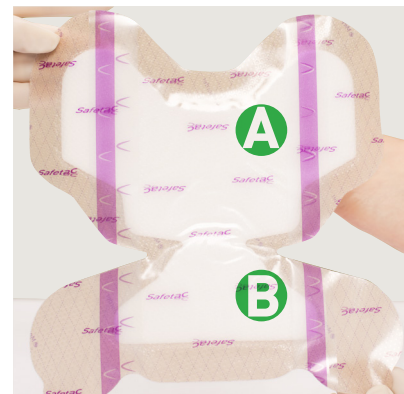

1. Torka området noga efter rengöring av huden/såret. Ta bort den mittersta delen av skyddsfilmen och placera förbandet under hälen.



2. Applicera den vidhäftande delen av förbandet som är markerad med "A" (se illustration ovan) på bakre delen av hälen/akillesområdet. Placera den smalaste delen av förbandet på hälbasen. Sträck ej förbandet.



3. Ta bort skyddsfilmen från en av flikarna märkt med "A". Applicera och släta ut. Upprepa med andra sidan. Sträck ej förbandet.



4. Applicera varsamt den självhäftande delen av förbandet, märkt med "B" (se illustration ovan) under fotsulan. Sträck ej förbandet.



5. Ta bort skyddsfilmen från en av flikarna märkt med "B". Applicera och släta ut kanten. Upprepa med andra sidan. Sträck ej förbandet.



6. Tryck och släta ut så att hela förbandet är i kontakt med huden.

Om du behöver undersöka underliggande hud eller sår



1. Dra försiktigt i flikarna för att avlägsna förbandet från huden.



5. Kontrollera att förbandet har återapplicerats i sitt ursprungliga läge och se till att kanten är hel och slät.


Tips & Tricks

- **Tänk "A"** för "Akilles" för att komma ihåg hur förbandet appliceras korrekt
- Applicera förbandet på ren, torr hud
- Sträck inte förbandet under appliceringen
- Sätt på en antihalksocka om patienten är rörlig – det gör även att förbandet sitter kvar bättre
- Överväg att använda Tubifast® eller annan fixering som extra stöd för mycket rörliga patienter eller om förbandet har lätt för att lossna i förtid: förbandet är utvecklat för att vara skonsam mot huden

Mepilex® Border Sacrum

Appliceringsguide


Före applicering: Rengör intakt hud. Torka den omkringliggande huden noga. Se till att huden är fri från dimetikon (silikonolja), sprayplåster och mjukgörande krämer. Det behövs ingen hudbarriär under förbandet.

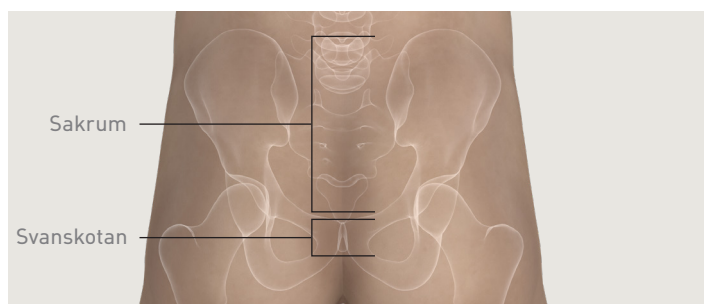

1. Område som ska skyddas. Bedöm patientens anatomi och välj lämplig placering för förbandet.



3. Håll isär skinkorna. Applicera förbandet på sakrumområdet och överst mellan skinkorna, med förbandets bas placerad så att svanskoteområdet täcks.

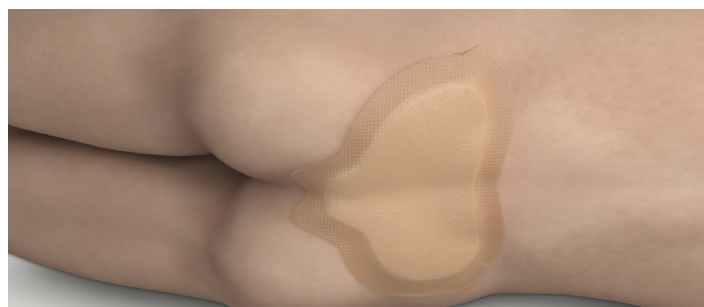

5. Placering av förbandet.



Korrekt passform:

- Förbandet ska placeras så att det passar patientens anatomi.
- Se till att förbandet ligger an mot huden och undvik glapp och luftfickor.



2. Efter rengöring och torkning, avlägsna mittendelen av skyddsfilmerna genom att försiktigt dra i kanten med rosa rand.



4. Ta bort skyddsfilmerna och jämna varsamt ut båda sidorna till rätt läge.




6. Tryck och släta ut så att hela förbandet är i kontakt med huden.

När du ska undersöka huden eller såret



4. Håll förbandet i sitt läge mellan skinkorna och bedöm huden genom att försiktigt dra i flikarna.

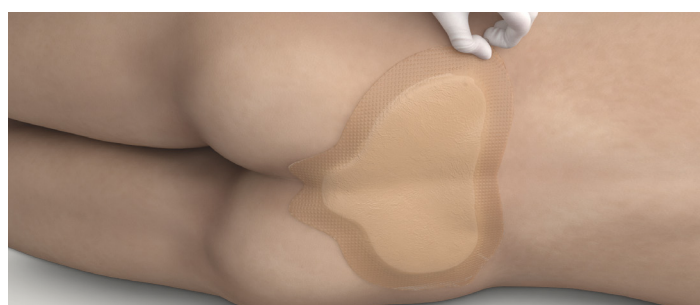

6. Kontrollera att förbandet har återapplicerats i sitt ursprungliga läge och se till att kanten är hel och slät.

Förbättrade egenskaper på våra förband

Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel

NYHET!

Optimerad **sårdyna**,
vidhäftning och försegling
för bättre skydd av
högriskområdet i sakrum¹

Mepilex®
Border
Sacrum

Optimerad form
för **bättre täckning**
av högriskområden¹

Tydliga flikar underlättar för
användaren vid återapplikering
av förbandet

Samma unika
uppbyggnad i
5 lager

Förstärkta kanter
för enklare hantering¹

Täcker malleolerna
för bättre skydd¹

Mepilex®
Border
Heel

Prevention

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum bidrar till att skydda huden från skador orsakade av tryck, skjuv, friktion och mikroklimat². Vidhäftningen med Safetac® skyddar huden, håller förbandet på plats och begränsar friktion och skjuv². Safetac® möjliggör även repositionering av förbandet efter hudinspektion.

Fördelar

- ✓ Självhäftande – ingen sekundär fixering behövs
- ✓ Mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten^{5, 6, 7}
- ✓ Kan sitta på plats i flera dagar
- ✓ Kan justeras och återappliceras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper

Behandling

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum absorberar och håller effektivt kvar sårvätskan i förbandet³ samt bevarar en fuktig sårmiljö. Safetac® förseglar sårkanterna, förhindrar sårvätska från att läcka ut på den omkringliggande huden och minskar därmed risken för maceration⁴. Tack vare Safetac® kan förbandet bytas utan att såret eller den omkringliggande huden skadas⁵ och utan att patienten utsätts för ytterligare smärta⁶.

Användningsområden

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum är utvecklade för att förebygga hudskada eller för behandling av vätskande sår, såsom trycksår, diabetiska fotsår, hälsår, traumatiska sår och sekundära läkande sår.

Mepilex® Border Sacrum

Art. Nr.	Storlek (cm)	Antal/Avd fp	Antal/Trp fp
282450	22 x 25	5	30
282050	16 x 20	5	40
282500	15 x 15 cm (Gammal design)	5	50

Levereras steril, enstycksförpackade

Mepilex® Border Heel

Art. Nr.	Storlek (cm)	Antal/Avd fp	Antal/Trp fp
282750	22 x 23	6	30

Levereras steril, enstycksförpackade

Referenser: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care [GMCS-2017-058] 2017 2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols – August 2012 3. White R et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 5. White R et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel + 46 31 722 30 00
Mölnlycke, Mepilex och Safetac är varumärken, namn och logotyper som globalt är registrerade av Mölnlycke Health Care AB eller annan juridisk person inom samma koncern som Mölnlycke Health Care AB. Copyright© 2017 Mölnlycke Health Care.
Med ensamrätt. HQPR0033


Mölnlycke®