

Mepilex® Lite

Det tunna absorberande skumförbandet

Absorberande polyuretanskum


- Absorberar sårsekret
- Fungerar under kompression
- Tunn och formar sig lätt efter kroppens konturer

Safetac® yta**

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration

Polyuretanfilm på ovensidan

- Andningsbar
- Virus- och bakteriebarriär*

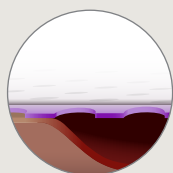

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringsliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.




* mikrober större än 25 nm

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Formar sig väl efter kroppens konturer och är bekväm att bära

Mepilex® Lite

Mölnlycke®


Så här används Mepilex® Lite

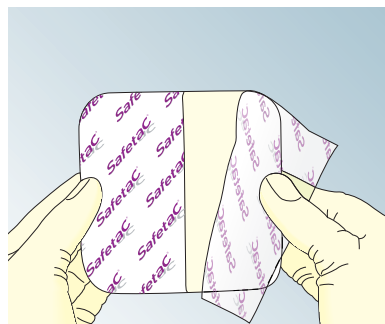

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddspappret.



Mepilex Lite bör överlappa den omkringliggande huden med minst 2 cm. Applicera den vidhäftande sidan mot såret. Sträck ej förbandet.

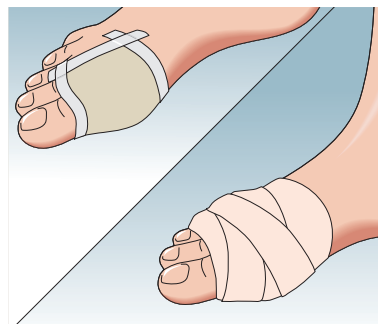

Vid behov, fixera Mepilex Lite med en binda eller annan fixeringsprodukt. (Tubifast, Mefix eller Mepore Film). Vid känslig hud bör Mepitac användas.

Så här fungerar Mepilex Lite

Mepilex Lite är tunt, följsamt och bekvämt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet är mycket formbart och flexibelt, vilket gör det väldigt smidigt att arbeta med. Mepilex Lite är enkelt att klippa till för att anpassa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Lite

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling
- Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa svårbandagerade områden
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi
- Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten

Användningsområden

Mepilex Lite kan användas på ett stort antal torra till svagt vätskande sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska och smärtsamma sår, strålreaktioner, brännskador och vid Epidermolysis Bullosa (EB). Mepilex Lite kan även användas som skydd på känslig hud.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Lite om lämplig infektionsbehandling inleds.



Mepilex Lite levereras steril, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	4	24

References: 1. White R, A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-10

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Lite are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

