


# Veressnål


Truly customized laparoscopic solutions

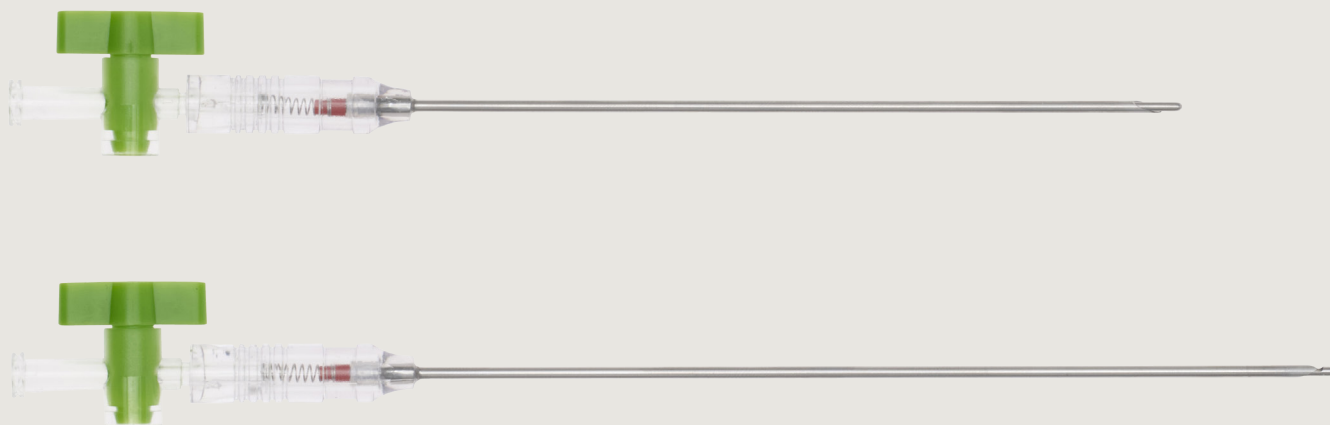

Veressnålen används för att skapa ett pneumoperitoneum vid laparoskopier.

- Vass, slipad spets för enkel och säker punktion genom bukväggen
- Transparent handtag med tydlig röd visuell lägesindikator
- Fjädrande spets som avger ett känn- och hörbart klick för säker och korrekt placering
- När nålen har penetrerat bukväggen förhindrar en slät skyddshylsa risken att spetsen skadar närliggande organ
- Vridbar kran för flöde med luer lock-koppling för anslutning till insufflationsslangen
- Finns i två längder – 120 mm och 150 mm
- Trubbig spets med noggrant positionerad distal insufflationskanal för säker och kontrollerad insufflation

Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i ProcedurePak® kundanpassade set

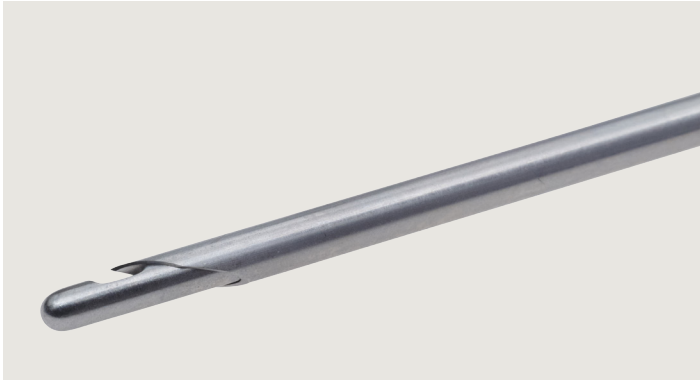

Veress nålspets.



Veress nålkropp.

Art. Nr.	Beskrivning	Längd	Avd Fp
899105	Veressnål 120 mm	120 mm	25
899106	Veressnål 150 mm	150 mm	25

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.  
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HGSU0099