

● Mepilex® XT

Det formbara skumförbandet med unika kanaler för sårvätska


- Förbättrad hantering av sårvätska¹
- Hanterar även trögflytande sårvätska effektivt^{1,2}
- Minimerar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden³
- Minimerar smärta vid förbandsbyten⁴

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Vidhåftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration⁵

Baksidesfilm av polyuretan

- Andningsbar
- Vätsketät
- Skyddar mot virus och bakterier >25nm⁸

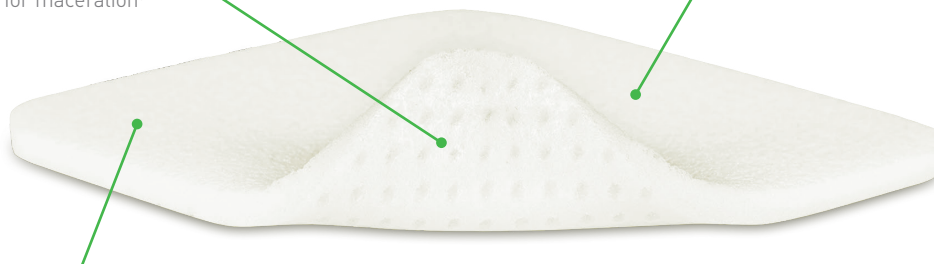

Sårdyna av polyuretanskum

- Förbättrad hantering av sårvätska¹
- Kanaler för sårvätska som även absorberar trögflytande sårvätska²
- Formbart och flexibelt skum⁶


SafetaC
TECHNOLOGY

* Mepilex XT behöver inte klippas till sårets storlek vid kompressionsbehandling


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.molnlycke.se/safetac/

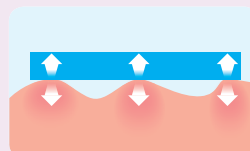


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhålla aggressivt för att sitta på plats

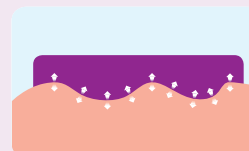

Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


Så här används Mepilex® XT

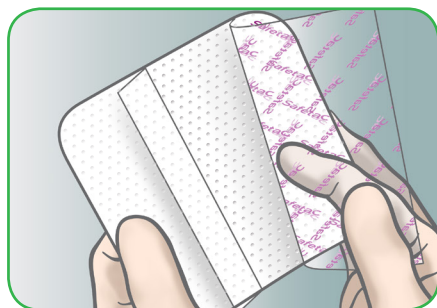

1. Rengör såret enligt rutin. Torka omkringliggande hud torr. Avlägsna skyddspappret.



2. Mepilex® XT ska överlappa den omkringliggande huden med 1-2 cm vid förbandsstorlek upp till 12,5 x 12,5 cm, 5 cm vid större förbandsstorlek. Mepilex XT kan vid behov klippas och formas efter såret. Lägga den klabbiga sidan mot såret. Sträck inte förbandet.

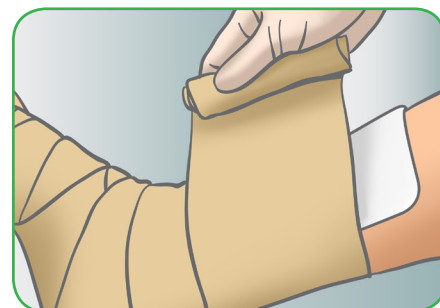

3. Om nödvändigt, fixera Mepilex® XT med binda eller annan fixeringsprodukt.

Så här fungerar Mepilex® XT

Mepilex XT är ett mjukt och formbart⁶ skumförband med integrerade kanaler som är utformade för att transportera sårvätska snabbt² in i den absorberande skumdynan.

Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex® XT

- Minimerar maceration, absorberar sårvätska och kan även hantera trögflytande sårvätska^{2,5}.
- Kan användas i alla sår-läkningsfaser.
- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.^{3,4,8}
- Främjar patientkomfort.
- Passar väl att användas under kompression.^{1,2}
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd.^{2,9}
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om.
- Sitter kvar på plats vilket frigör båda händerna och underlättar applicering av fixeringslösningar.²
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan.
- Låg risk för hudirritation och allergi.¹⁰

Användningsområden

Mepilex® XT kan användas på ett stort antal vätskande sår, akuta och kroniska, i alla sår-läkningsfaser, så som ben- och fotsår, trycksår och traumatiska sår.

Notera

- Använd inte förbandet om patienten är känslig mot förbandet och dess innehåll. Om tecken på infektion skall hälso- och sjukvårdspersonal konsulteras för adekvat behandling.
- Använd inte Mepilex® XT tillsammans med oxierande medel såsom hypokloridlösningar eller hydrogen peroxid.



Mepilex® XT

levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Trp fp
211015	5 x 5	5	40
211100	10 x 10	5	70
211200	10 x 20	5	45
211300	15 x 15	5	25
211400	20 x 20	5	20
211500	20 x 50	2	12

Referenser:

1. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 2. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 3. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012. 4. Fluid handling and retention properties Mepilex XT : Report no. 20130123-006 (SMTL). 5. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 6. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Report No. 20130104-004/20121012-004/20130104-004 (MHC). 7. Meuleneire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WUWHS, 2008. 8. External Test Lab Report no. 413098 (Nelson Laboratories). 9. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001. 10. Biocompatibility Evaluation, Filed in MHC.

Läs med på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon: 031-722 30 00
The Molnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® XT are registered trademarks of Molnlycke Health Care AB 2013. All rights reserved.