

Tubifast[®] WITH 2-WAY STRETCH[®] TECHNOLOGY

Elastiskt tubbandage för fixering av förband

Tubifast[®] TwoWay Stretch håller säkert och bekvämt förbandet på plats utan kompression.

Snabb och enkel att använda: klipp helt enkelt till önskad längd och trä över förbandet för en jämn passform utan kompression.

Tubbandage gör att varken tejp eller säkerhetsnålar behövs.

Snabbheten och enkelheten i användandet gör att risken för smittspridning minskar.

Finns i fem färgkodade storlekar vilka är utformade för att smidigt passa över samtliga kroppsdelar oberoende storlek eller form.


Tubifast[®] TwoWay Stretches elasticitet både på längden och på bredden ger patienten full rörlighet och hög bekvämlighet¹.

Fransar mindre, vilket reducerar risken för att få fibrer i såret².


2-WAY STRETCH

Tubifast[®] TwoWay Stretch[®] är ett elastiskt tubbandage med elasticitet både på längden och på bredden¹. Denna unika förmåga skapar full rörlighet och extra bekvämlighet för patienten. Det är idealiskt för fixering av förband och för att skydda och täcka huden. Tubbandaget kan även användas som skydd under gips. Tubifast TwoWay Stretch gör det lätt att fixera förband utan tejp eller säkerhetsnålar. Det är enkelt och går snabbt att använda, med mindre risk för friktion och fibersläpp² än traditionellt tubbandage.


Så här använder du Tubifast® TwoWay Stretch®

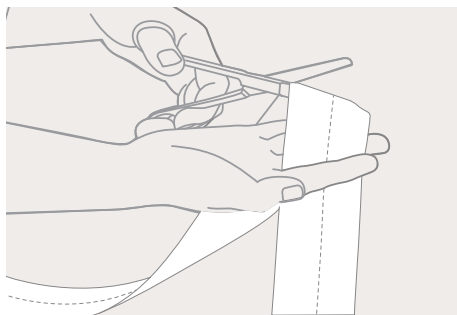

1. Välj rätt bredd på tubbandaget med hjälp av färgkodningen och klipp därefter till önskad längd.

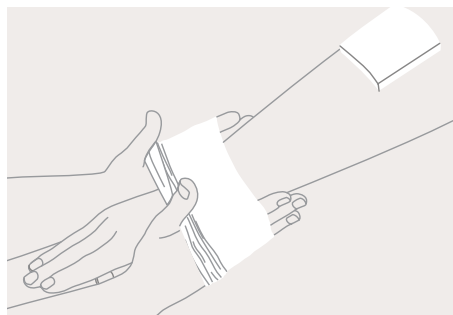

2. Applicera sedan Tubifast TwoWay Stretch över det aktuella område

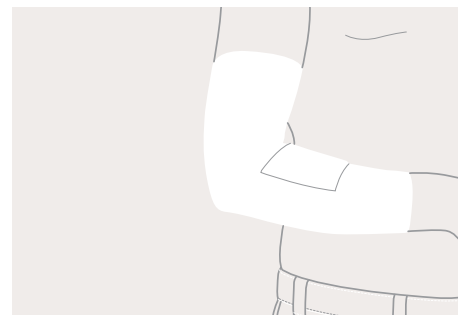

3. Placera Tubifast TwoWay Stretch så att förbandet täcks. För mer avancerade appliceringar finns det en appliceringsguide med både text och illustrationer.

Hur fungerar Tubifast TwoWay Stretch

Tubifast TwoWay Stretch är tillverkad av viskos och har tunna elasthantrådar invävda i tyget både på längden och på bredden för att skapa elasticitet åt båda håll. Tubifast TwoWay Stretch håller kvar förbandet säkert och bekvämt utan kompression och utan att behöva tejp eller säkerhetsnålar. Genom att det är elastiskt åt två håll får patienten full rörelsefrihet och extra komfort. Tubifast TwoWay Stretch finns i fem storlekar, utformade att passa över samtliga kroppsdelar oberoende form eller storlek. De olika storlekarna är lätta att identifiera med hjälp av den färgkodning som är invävd i bandaget. Det är enkelt och går snabbt att använda: klipp helt enkelt till önskad längd och trä över förbandet för en jämn och bekväm passform utan kompression.

Fördelar med Tubifast TwoWay Stretch

- Tubifast TwoWay Stretch fixerar förband på ett säkert och bekvämt sätt utan kompression.
- Genom att ha elasticitet både på längden och på bredden får patienten full rörelsefrihet och extra komfort.
- Snabbt och enkelt att använda: klipp helt enkelt till önskad längd och trä över förbandet för en jämn och bekväm passform utan kompression.
- Finns i varierande storlekar som är utformade att passa alla kroppsdelar, stora som små, och genom färgkodningssystemet går det snabbt och enkelt att identifiera.
- Genom att det fransar mindre reduceras risken för att få fibrer i såret².

Innehåll

Viskos, Elastan och Polyamid

Tvättinstruktioner



Användningsområden

Tubifast TwoWay Stretch kan användas som ett fixeringsförband och för att skydda huden på alla delar av kroppen. Som tubförband kan det även användas som skydd under gips. Tack vare sin tubkonstruktion och att det stretchar både på längden och på bredden är Tubifast TwoWay Stretch särskilt lämplig när det gäller att fixera förband på annars svårbandagerade delar av kroppen, exempelvis på hälar eller amputationsstumpar.

Tubifast TwoWay Stretch sortiment

Produkt	Bredd x Längd	Omkrets	Art. nr
RÖD Små kroppsdelar	3,5cm x 1m	9-18cm	2480
	3,5cm x 10m	9-18cm	2434
GRÖN Små och mellanstora kroppsdelar	5cm x 1m	14-24cm	2481
	5cm x 3m	14-24cm	2485
	5cm x 10m	14-24cm	2436
BLÅ Stora kroppsdelar	7,5cm x 1m	24-40cm	2482
	7,5cm x 10m	24-40cm	2438
GUL Extra stora kroppsdelar, huvud och barns bål	10,75cm x 1m	35-64cm	2483
	10,75cm x 10m	35-64cm	2440
LILA Storvuxnas bål	20cm x 1m	64-130cm	2479
	20cm x 10m	64-130cm	2444

(Tubifast TwoWay Stretch levereras enstycksförpackade)

Varken produkt eller förpackning innehåller naturgummitatex.

Referenser:

- 1 Published data shows that Tubifast TwoWay Stretch exceeds the minimum requirement of longitudinal stretch for the actions of sitting, bending and flexing. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.
- 2 Data on file – Fibre Survey carried out on behalf of Mölnlycke Health Care Limited, May 2009.

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQ-IM000405




Mölnlycke®