


# Mölnlycke® Monopolär L-hook handaktiverad

Truly customised laparoscopic solutions




Vår 5mm laparoskopiska monopolära L-hook ger en exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader. Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i Mölnlyckes kundanpassade set.

- **PTFE beläggningen** reducerar risken att vävnad fastnar på den aktiva elektroden, minimerar kirurgiskt avbrott samt minskning av termisk spridning med resulterande vävnadsnekros
- Mölnlycke® L-Hook erbjuder en hållbar lösning, **fri från PVC** med en TPU kabel och koppling
- Lätt, ergonomisk handtagsdesign möjliggör exakt kontrollerad vävnadsdissektion.
- **Handaktivering** möjliggör förbättrad ergonomi
- Elektroden går att ta isär från diatermihandtaget vilket möjliggör justering av elektroden i förhållande till aktiveringsknapparna

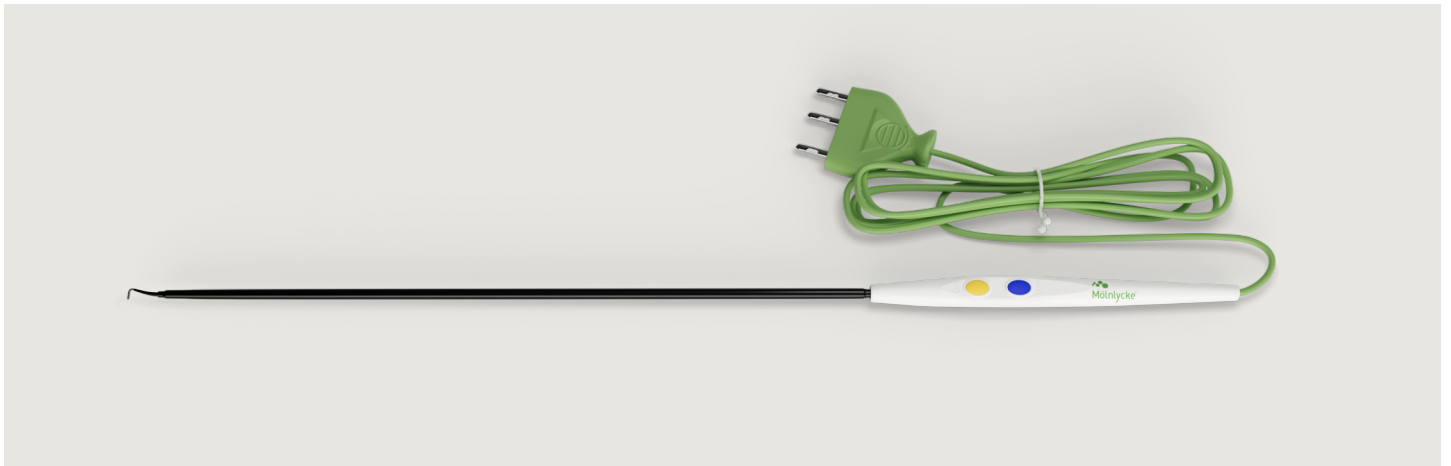

Monopolär L-hook med kabel

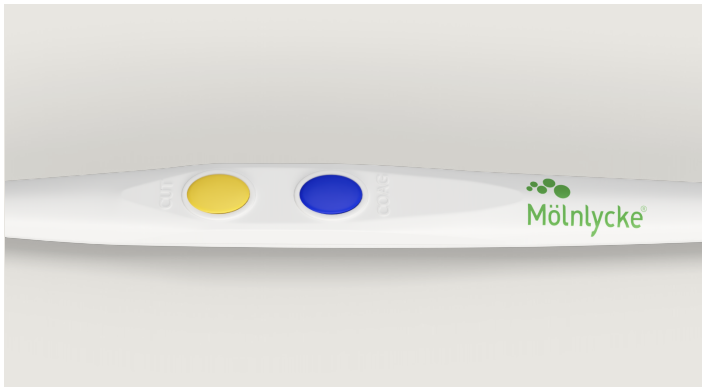

Handtag med aktiveringsknappar



Hook

## Steril enstycksförpackad

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Kabel längd	Avd.förp.	TRP
420200	Monopolär L-hook handaktiverad	5mm	330mm	3m	10	120

## Tillgängligt i kundanpassade set

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Kabel längd
2326270-00	Monopolär L-hook handaktiverad	5mm	330mm	3m

Juridisk tillverkare: Prima Medical LTD. Imported and distributed by: Mölnlycke Health Care AB

Find out more at [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00  
The Mölnlycke and ProcedurePak trademark, name and logo is registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. 2022HQIM003793

