



Mepilex® Border Sacrum och Mepilex Border Heel

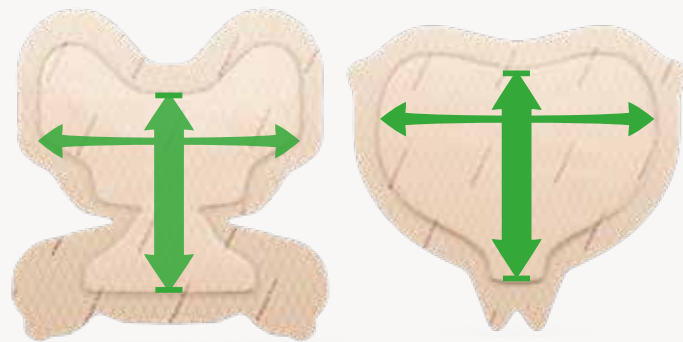

Förbanden har **vertikal styrka** och **horisontell flexibilitet** som skyddar mot de yttre skjuv-/glidkrafter som orsakar trycksår^{1,2}.

När en patient ligger i upphöjt sängläge glider hen nedåt, denna **vertikala** glidning orsakar vävnadsdeformation i **en riktning**^{1,2}.

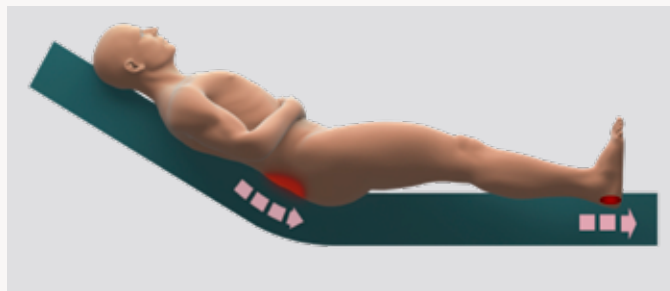

Mepilex Border Sacrums och Mepilex Border Heels uppbyggnad i flera lager ger ökat skydd mot dessa specifika vertikala tryck-/skjuvkrafter^{1,2}.

Mepilex® Border Flex med Flex-teknologi



Flex-teknologin möjliggör rörelse i alla riktningar vilket gör förbandet **följsamt** och minskar sträckningar i huden^{3,4}.

För andra områden med risk för trycksår, ex bukläge, påverkas vävnaden av yttre tryck-/skjuvkrafter i olika riktningar⁵.



Datasimuleringar visar att Mepilex Border Flex minskar tryckkrafter i de mjuka vävnaderna över höftbenskammarna med upp till **80%** när de utsätts för tryck i olika riktningar⁶.

Trycksårsprevention med Mepilex® Border förband



Referenser:

1. Levy A, Gefen A. Assessment of the biomechanical effects of prophylactic sacral dressings on tissue loads: A computational modeling analysis. *Ostomy Wound Management* 2017;63(10):48-55. 2. Levy, A., Frank B.M., Gefen, A. The biomechanical efficacy of dressings in preventing heel ulcers. *Journal of Tissue Viability* 2015. Available from: doi: 10.1016/j.jtv.2015.01.001. Epub 2015 Jan 19. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations. Report no. PD-529747. Data on file PD-528870. 5. Gefen, A. Expert opinion on pressure injury risks in the OR. August 2019. 6. FE simulation of PUP at the iliac crest in OR with Mepilex Border Flex Mölnlycke Health Care, Data on File 2019. 7. Davies, P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care 2017. Data on file.

För mer information, vänligen besök: www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke Health Care and Mepilex Border are names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. RNWC0572007



Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Heel
Mepilex Border Flex



Mölnlycke® trycksårsförebyggande förband

Ryggläge

BAKHUVUD:
Mepilex Border Flex

SKULDERBLAD:
Mepilex Border Flex

ARMBÅGE:
Mepilex Border Flex

SAKRUM:
Mepilex Border Sacrum

HÄL:
Mepilex Border Heel

Bukläge

PANNA och HAKA
Mepilex Border Flex Oval

BRÖST
Mepilex Border Flex

HÖFTBEN
Mepilex Border Flex

KNÄ
Mepilex Border Flex

FOTENS OVANSIDA
Mepilex Border Flex

För användning på sakrum och häl



Mepilex® Border Sacrum och Mepilex Border Heel

För användning på andra utsatta områden



Mepilex Border Flex och Mepilex Border Flex Oval

Mepilex Border Sacrum

Art. nr	Storlek cm	Ant/avd
282450	22 x 25	5
282050	16 x 20	5
282500	15 x 15	5

Mepilex Border Heel

Art. nr	Storlek cm	Ant/avd
282750	22 x 23	6

Mepilex Border Flex

Art. nr	Storlek cm	Ant/avd
595200	7,5 x 7,5	5
595300	10 x 10	5
595000	12,5 x 12,5	5
595400	15 x 15	5
595600	15 x 20	5
595800	10 x 20	10
595850	10 x 25	10
595900	10 x 30	10
583500 Oval	7,8 x 10	5
583300 Oval	13 x 16	5
583400 Oval	15 x 19	5