

Över hälften (58 %) av patienterna klagar över att förbandet drar i huden eller att förbandet inte följer med i kroppens rörelser⁹.

Utvecklat för att ha följsam passform och sitta kvar länge


Tack vara Flex-teknologins unika formbarhet anpassar sig Mepilex Border Flex till kroppens konturer och patientens rörelser⁴. Förbandet har en förmåga att minska trycket mot huden och undvika stumma sträckningar vilket ökar bekvämligheten och möjligheterna att sitta på längre¹⁰.

Mepilex Border Flex är duschbart¹¹.



Flex-teknologi= 360° stretch

Förbandets perforeringar ger ökad rörelsefrihet

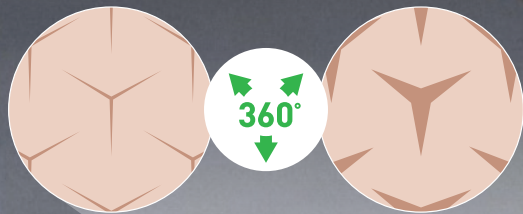


UPP TILL **11x**
mer flexibelt
än andra
skumförband⁴.

Mepilex® Border Flex kan minska dina kostnader

Varje onödigt förbandsbyte innebär obehag för patienten samt medför en ökad kostnad, inte enbart i materialförbrukningen utan även vårdpersonalens tid.

I ett årslångt kvalitetsförbättringsprojekt observerades att Mepilex Border Flex, i kombination med andra åtgärder, bidrog till att reducera totalkostnaderna genom att sitta på plats längre, minska antalet förbandsbyten och bättre stödja sårläkningen samt underlätta för vårdpersonalen¹.

I ett annat förbättringsprojekt observerades att gruppen som använde Mepilex Border Flex förbrukade färre förband jämfört med gruppen som använde tidigare förband. Därmed minskades den totala vårdkostnaden samt vårdpersonalens arbetsbelastning².

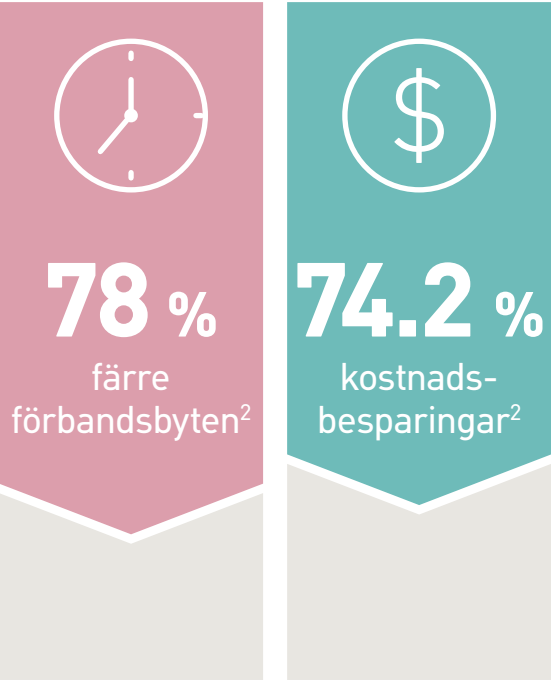

På molnlycke.se kan du läsa mer hur Mepilex® Border Flex kan hjälpa dina patienter, ditt vårdteam och din budget.

Fyrkantiga			Ovala		
Artikelnummer	Storlek (cm)	Antal/ Avd fp	Artikelnummer	Storlek (cm)	Antal/ Avd fp
595200	7,5x7,5	5	583500	7,8x10	5
595300	10 x 10	5	583300	13x 16	5
595000	12,5x12,5	5	583400	15x19	5
595400	15 x 15	5			
595600	15 x 20	5			
595800	10 x 20	10			
595850	10 x 25	10			
595900	10 x 30	10			

Referenser: 1. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 2. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Arkivdata. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Arkivdata. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Arkivdata. 6. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Arkivdata. 7. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Arkivdata. 8. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 9. Opinion Matters 'Professional Health Care Treatment for Wounds' survey conducted June-July 2018 in UK. Arkivdata. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Allevyn Life. Report no. PD-529747. Arkivdata. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Arkivdata. 12. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerrFoam Gentle Border. Report no. PD-527442. Arkivdata. 13. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Arkivdata. 14. Mölnlycke Health Care. Product manual Initial abs different test solutions. Arkivdata. 15. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Report no. PD-535090. Arkivdata. 16. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 17. Meaume S et al.

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg. Tel + 46 31 722 30 00 Mölnlycke-, Mepilex®- och Safetac-varumärkena och -logotyperna är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQIM001255

Sitter säkert

Unik passform



Mepilex® Border Flex


Vår nästa generation av flexibla förband



Sår behöver läka. Patienter behöver vård. Vårdpersonal behöver tid. Budgeten är begränsad. Utmaningen är att hitta ett förband som är bekvämt och sitter kvar så länge det behövs.


Vi introducerar Mepilex® Border Flex-familjen

Vår nästa generation av flexibla förband är utvecklad för att forma sig efter kroppen och sitta kvar – vårdpersonalen får mer tid, kostnaderna minskar och patienterna upplever en bättre livskvalitet^{1,2}.

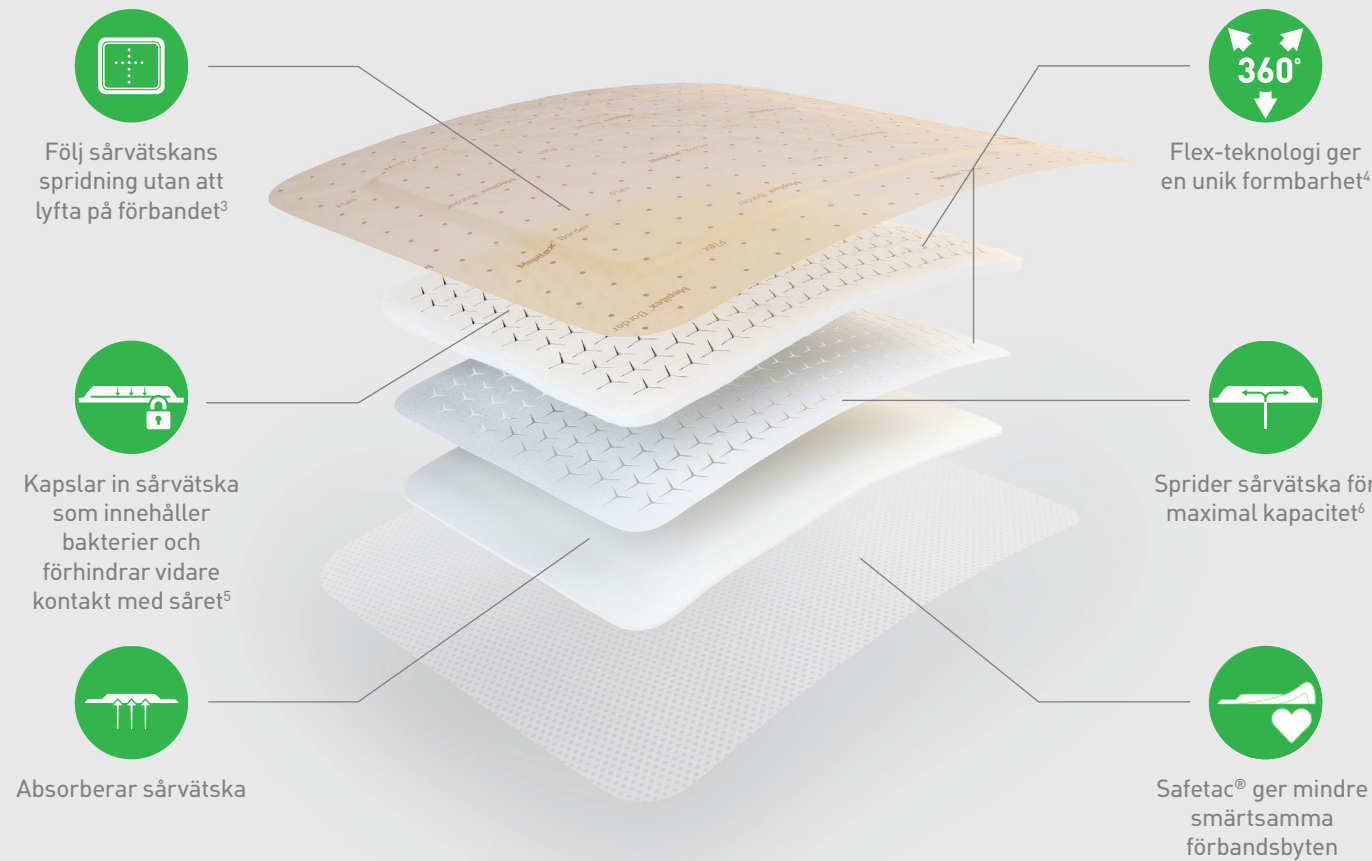


Välj rätt förband för din patients behov


Utvecklat för användning på flera typer av vätskande sår såsom ben- och fotsår, trycksår, traumatiska sår (t. ex. hudfliksskador) samt som en del i trycksårsförebyggande program.

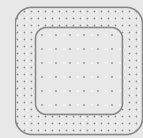

Kvadratisk

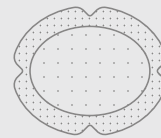

Ovalt

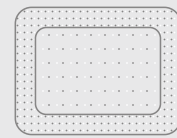

Rektangulärt

Upp till 1/3 av patienterna klagar på att de behöver byta förband dagligen⁹.

Smart vätskehantering

Förbandet kan sitta kvar längre samtidigt som det upprätthåller en optimal sår läkningsmiljö.



1. Snabb absorption:

Skumlagret suger snabbt upp både normal och trögflytande sårvätska^{13,14}, sväller minimalt och hanterar sårvätskan bättre än andra jämförande förband¹².



2. Maximerar kapaciteten genom att sprida sårvätskan:

Sårvätskan leds bort från såret och sprids över en större yta som möjliggör högre andningsbarhet genom baksidesfilmen^{6,7}.



3. Kapslar in sårvätska och bakterier och håller dem borta från såret:

De superabsorberande fibrerna i retentionslagret förhindrar att sårvätska med bakterier kommer i kontakt med sårbädden, även under kompression⁵. Samtidigt hindrar baksidesfilmen bakterier att komma in utifrån¹⁵.



4. Följ sårvätskan utan att lyfta på förbandet:

Exudate Progress Monitor gör det möjligt att följa, bedöma och registrera sårvätskans spridning utan att störa såret.³

SÅ MYCKET SOM

2,2x


högre vätskehantering jämfört med andra skumförband¹²

Så fungerar Exudate Progress Monitor – mönster för kontroll av sårvätskan

När såret får vara ostört underlättas läkningen. Med Exudate Progress Monitor kan du enkelt följa sårvätskans spridning och låta förbandet sitta kvar längre.³




Exudate Progress Monitor är ett mönster med jämnt fördelade prickar.

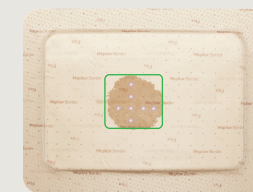

t.ex. 4 x 4 cm
I takt med att sårvätskan sprids i förbandet kan du registrera antalet prickar som visar vätska i förbandet.



t.ex. 8 x 10 cm
Du kan fortsätta följa hur sårvätskan sprider sig i förbandet med hjälp av det du registrerar.

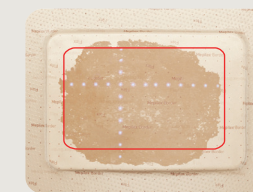

t.ex. 10 x 14 cm
Överväg att byta förband när sårvätskan närmar sig förbandets kanter.*

*Frekvens för sårinspektion och förbandsbyte styrs av kliniska beslut och bör avgöras av den behandlande vårdpersonal.

9 av 10 patienter upplever att deras sår påverkar livskvaliteten⁹.

Mindre smärta och vävnadsskada

Mepilex Border Flex vidhäftar med Safetac, som sedan länge bevisats ge mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{8,16,17}.

9/10

patienter föredrar förband med Safetac® framför andra förband med traditionell häfta⁸

